




Gruppo CSF Urimatic-lab III

Analizzatore automatico delle urine

**Un sistema semplice,
rapido e sicuro
per effettuare in farmacia:**

- ✓ autoanalisi dell'urina
- ✓ test di gravidanza
- ✓ test di ovulazione

Urimatic-lab III è un fotometro a riflessione in grado di effettuare un'ampia serie di test sulle urine mediante la lettura di apposite strisce di reagenti. I test vengono effettuati rapidamente e in modo totalmente automatico.

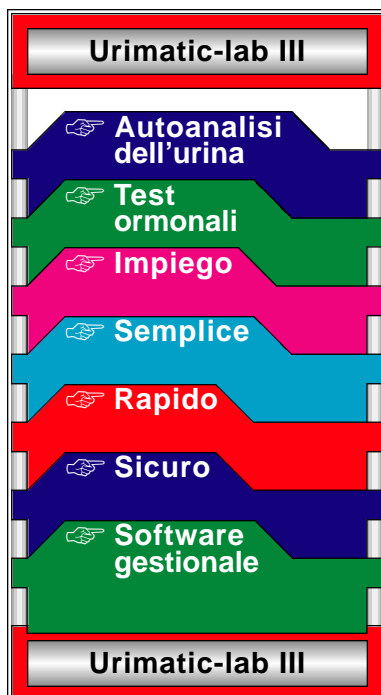

Autoanalisi dell'urina

Urimatic-lab III consente la determinazione degli undici parametri più significativi delle urine:

- Acido ascorbico
- Bilirubina
- Corpi chetonici
- Glucosio
- Leucociti
- Nitriti
- Peso specifico
- pH
- Proteine
- Sangue
- Urobilinogeno

Test ormonali

Urimatic-lab III consente la determinazione qualitativa dell'hCG (gonadotropina corionica umana) nell'urina, per la diagnosi precoce della gravidanza; inoltre consente la determinazione qualitativa dell'hLH (ormone luteinizzante) nell'urina, per stabilire, in anticipo, il momento dell'ovulazione.

Impiego

Il campo di indagine offerto dall'analisi delle urine è vastissimo.

È uno degli esami più diffusi e di maggior utilizzo sia dal punto di vista dello screening diagnostico sia da quello di indagine mirata per quesiti clinici specialistici.

L'analisi dell'urina oltre a fornire informazione che permettono l'esatta valutazione dei dati sulla funzionalità epatica, renale e sul metabolismo glicidico, è importante come selezione verso ulteriori e più approfondite ricerche.



Semplice

Urimatic-lab III è semplice. Per eseguire i test basta immergere, per un secondo, la striscia di reagenti nel campione di urina, inserirla sull'apposito carrello dello strumento e premere il pulsante di start. Il carrello di scorrimento viene trascinato automaticamente sotto la testina ottica di lettura e lo strumento inizia ad analizzare i vari parametri. I test terminano con la stampa dei risultati.

Rapido

Urimatic-lab III è rapido. La totale automaticità del sistema consente di effettuare la misurazione dei diversi parametri nei seguenti tempi:

- un minuto per l'analisi completa delle urine (undici parametri);
- da un minimo di 3 minuti a un massimo di 5 minuti per l'analisi di gravidanza (hCG) e l'analisi di ovulazione (hLH).

Sicuro

Urimatic-lab III è sicuro. La lettura dei valori dei test si effettua con un fotometro a riflessione che misura l'intensità della luce dalla superficie della striscia di reagenti. Tale sistema di misura consente un'accurata e sicura determinazione dei valori. In fase di stampa i valori anomali vengono evidenziati con speciali caratteri.

Software gestionale

Urimatic-lab III è corredato del software di gestione CSF Soft Lab. E' un programma, di facile apprendimento, che consente l'archiviazione dei risultati dei test. Il programma permette la gestione dell'archivio clienti con la registrazione dei risultati dei test eseguiti sull'**Urimatic-lab III**. CSF Soft Lab prevede, tra l'altro, la consultazione e stampa dell'archivio storico di ogni singolo cliente.

Caratteristiche tecniche

- Fotometro a riflessione per test su strisce reattive
- Lettura ottica a tre colori
- Programma su EEprom 8kB
- Selezione automatica dei programmi di lettura
- Taratura automatica
- Gruppo motorizzato del carrello di scorrimento
- Carrello di scorrimento per strisce da 6 mm
- Superficie massima di lettura 80 mm²
- Massimo 12 posizioni di lettura per programma
- Tempo minimo di misura 1 minuto
- Stampante termica 24 caratteri
- Selezione del formato di stampa (valori o simboli)
- Software gestionale
- Interfaccia seriale RS232
- Alimentazione 9V DC
- Temperatura di esercizio +15° + 30° C
- Dimensioni 28x35x11 cm



CSF Elettronica

Via del Ciavattino - 03012 Anagni (Fr)
Tel. 0775 7771 - Fax 0775 727112
<http://www.gruppocsf.com>

Inviar e per fax al numero 0775 727112

Sono interessato a ricevere maggiori informazioni sull'Urimatic-lab III.
Gradirei: ricevere materiale illustrativo essere contattato per un appuntamento

Farmacia _____

Dott. _____

Indirizzo _____

Tel. _____ Cap _____

Città _____ Prov. _____

Con la compilazione e l'invio del presente coupon, autorizzo, ai sensi della L. 675/96 la CSF Elettronica srl a trattare, comunicare e/o trasferire, anche ad altre società appartenenti al Gruppo CSF, i miei dati personali, per ricevere ulteriori informazioni in merito a prodotti e servizi delle società del Gruppo CSF, informazioni commerciali e materiale pubblicitario. Se non desidera che i suoi dati personali vengano utilizzati per l'invio del materiale suindicato, barri la seguente casella .

Ai sensi dell'art. 13 della L. 675/96, Lei ha diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere informazioni in merito ai suoi dati, di farli modificare o cancellare o di opporsi al loro ulteriore utilizzo. Tale suo diritto potrà essere esercitato scrivendo alla CSF Elettronica srl - Via del Ciavattino, sn - 03012 Anagni, all'attenzione del responsabile trattamento dati.

Numer o verde dedicato 800 334499