



Gruppo CSF Clinic Analyzer II

Analizzatore automatico sangue e acque

**Un sistema semplice,
rapido e sicuro
per effettuare in farmacia:
✓ autoanalisi del sangue
✓ analisi delle acque**

Clinic Analyzer II è un sistema che consente di effettuare un'ampia serie di test sul sangue e sulle acque. L'automatilità del sistema e i reattivi già predosati nella cuvetta di ogni singolo test, rendono l'esecuzione della analisi semplice e immediata.



Autoanalisi del sangue

Clinic Analyzer II consente di effettuare i seguenti test:

- su sangue capillare: Acido lattico, Colesterolo, Ematocrito, Emoglobina, Eritrociti, Glucosio, Trigliceridi.
- su siero o plasma: Acido urico, Albumina, Alfa amilasi, Bilirubina totale, Calcio, Cloruri, Colestolo HDL, Creatina chinasi, Creatinina, Ferro, Fosfatasi alcalina, Fosforo inorganico, Gamma GT, GOT, GPT, LDH, Magnesio, Potassio, Proteine totali, Sodio, Urea.

Analisi delle acque


Clinic Analyzer II consente di effettuare i seguenti test chimici sulle acque:

- Ammonio low, Cloro libero, Cloruri, Durezza totale, Ferro, Nitrati, Nitriti, pH, Solfati.

Impiego

Clinic Analyzer II permette di eseguire analisi di prima istanza per:

- evidenziare categorie a rischio ed indirizzare il paziente al medico curante (es. familiari di soggetti diabetici, obesi);
- verificare l'effetto di trattamenti farmacologici (es. nel diabete e nelle dislipidemie, malattie che richiedono un continuo controllo);
- effettuare screening di massa per il controllo dello stato di salute per classi di popolazione, età).

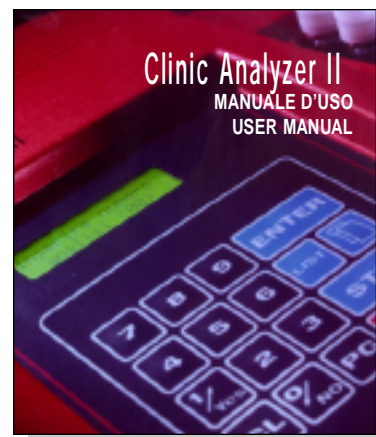

Semplice

Clinic Analyzer II è semplice. Tutto è pronto per un immediato utilizzo: ogni test viene eseguito digitando dei semplici comandi sulla testiera.

I reattivi già predosati in cuvetta rendono semplice ed immediata l'esecuzione dei test. La stampa dei risultati, nelle unità di misura richieste, con il confronto ai valori di riferimento minimi e massimi completa l'esecuzione dei test.

Rapido

Clinic Analyzer II è rapido. La totale automaticità del sistema consente di effettuare l'esatta misurazione dei diversi parametri in un tempo variabile:

- da un minimo di 10 secondi a un massimo di 5 minuti per le analisi sul sangue;
- da un minimo di 5 secondi a un massimo di 3 minuti per le analisi sulle acque.

Sicuro

Clinic Analyzer II è sicuro. La lettura dei valori delle analisi si effettua con una determinazione spettrofotometrica del colore formatosi con la miscela di reazione presente in cuvetta. Tale sistema di misura, basato sulla chimica liquida (l'unica utilizzata nei laboratori), consente una accurata e sicura determinazione dei valori.

Software gestionale

Clinic Analyzer II è corredato del software di gestione CSF Clinic Soft. E' un programma, di facile apprendimento, che consente l'archiviazione dei risultati dei test diagnostici. Il programma permette la gestione dell'archivio clienti con lo storico dei test diagnostici eseguiti sul **Clinic Analyzer II**. CSF Clinic Soft prevede, tra l'altro, la consultazione e stampa dell'archivio storico di ogni singolo cliente.


Caratteristiche tecniche

- Spettrofotometro
- 5 filtri interferenziali
- Campo spettrale 340 ÷ 630 nm
- Filtri: 340, 405, 505, 546, 630 nm
- Cambio filtri motorizzato e automatico
- Rilevatore allo stato solido
- Lampada alogena 5W
- Incubatore a 37° C con 10 posizioni
- Tastiera numerica con tasti di funzione
- Display alfanumerico LCD
- Stampante termica 20 caratteri
- Programma su EEprom
- Sistema di misura con azzeramento automatico
- Tempo di misura 10" - 5'
- Interfaccia seriale RS232
- Alimentazione 110/220 V 50/60 Hz
- Temperatura di esercizio +15° + 30° C
- Dimensioni 36,5x30x11 cm

CERT. N° 9120.CSFE



UNI EN ISO 9003

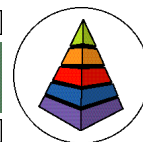

CSF Elettronica

Via del Ciavattino - 03012 Anagni (Fr)
Tel. 0775 7771 - Fax 0775 727112
<http://www.gruppocsf.com>

Inviar e per fax al numero 0775 727112

Sono interessato a ricevere maggiori informazioni sul Clinic Analyzer II.

Gradirei: ricevere materiale illustrativo essere contattato per un appuntamento

Farmacia _____

Dott. _____

Indirizzo _____

Tel. _____ Cap _____

Città _____ Prov. _____

Con la compilazione e l'invio del presente coupon, autorizzo, ai sensi della L. 675/96 la CSF Elettronica sri a trattare, comunicare e/o trasferire, anche ad altre società appartenenti al Gruppo CSF, i miei dati personali, per ricevere ulteriori informazioni in merito a prodotti e servizi delle società del Gruppo CSF, informazioni commerciali e materiale pubblicitario. Se non desidera che i suoi dati personali vengano utilizzati per l'invio del materiale suindicato, barri la seguente casella .

Ai sensi dell'art. 13 della L. 675/96, Lei ha diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere informazioni in merito ai suoi dati, di farli modificare o cancellare o di opporsi al loro ulteriore utilizzo. Tale suo diritto potrà essere esercitato scrivendo alla CSF Elettronica sri - Via del Ciavattino, sn - 03012 Anagni, all'attenzione del responsabile trattamento dati.

Numer o verde dedicato 800 334499